

• Description for:

- **Silk black:** Noncapillary silk has excellent handling and tying characteristics. Modern braiding technique provides a uniform smooth surface and a greater tensile strength.
- **PGA violet:** The extraordinarily smooth, low friction proprietary coating reduces tissue drag. These synthetic absorbable sutures ensure closure through the critical wound healing period. They retain approximately 50% of their high initial strength at two weeks and 20% of their strength at three weeks.
- **PGA rapid:** Developed for short-term closures, is ideal for skin and mucosa closings that may benefit from fast suture absorption. It maintains 50% strength at 5 days, 0% at 14 days and is essentially absorbed at 42 days. It is processed to absorb quickly with little tissue reaction.

• Descripción de:

- **Seda negra:** Seda no capilar, con excelentes características de manipulación y de vinculación. Moderno trenzado hecho con una técnica que proporciona una superficie lisa y uniforme con mayor resistencia a la tracción.
- **PGA violet:** Extraordinaria suavidad, baja fricción que reduce el deslizamiento del tejido. Estas suturas absorbibles garantizan el cierre durante el período crítico de cicatrización de la herida. Mantienen aproximadamente el 50% de su alta resistencia inicial a las dos semanas y el 20% de su fuerza hasta tres semanas.
- **PGA Rápido:** Desarrollado para el cierre a corto plazo, es ideal para la piel y la mucosa, que pueden beneficiarse de la rápida absorción de la sutura. Mantiene el 50% de efectividad durante 5 días, el 0% a los 14 días y es esencialmente absorbida a los 42 días. Ha sido procesado para absorción rápida con poca reacción tisular.

• Description pour:

- **Fil de soie noire:** (sans capillarités) Facile d'utilisation avec une excellente qualité de ligature. Sa technique de tressage moderne permet d'obtenir une surface lisse et uniforme pour une plus grande résistance à la traction.
- **PGA violet:** Son revêtement de tissus très lisse, à faible frottement permet de réduire la trainée. Les points de suture synthétiques absorbables garantissent une meilleure cicatrisation. Les points de suture maintiennent 50% de leur résistance initiale les deux premières semaines et résistent jusqu'à 20% au-delà de trois semaines.
- **PGA rapide:** Développé pour une cicatrisation rapide, le produit est idéal pour la peau et les muqueuses qui pourront bénéficier de sutures rapides. Les points de suture maintiennent 50% de la résistance les 5 premiers jours, 0% au 14 jours et le produit est totalement absorbé sous 42 jours. Ce produit permet une absorption rapide avec peu de réaction tissulaire.

• Erklärungen zu:

- **Schwarze Seide:** Die unfeine Seide hat eine hervorragende Handhabung und bindende Eigenschaften. Die moderne Flecht-Technik sorgt für eine einheitliche glatte Oberfläche und eine bessere Zugfestigkeit.
- **PGA violett:** Die äußerst glatte, reibungsarme und schützende Beschichtung reduziert Gewebewiderstände. Diese synthetischen resorbierbaren Nähte garantieren die Schließung der Narbe während der kritischen Zeit der Wundheilung. Sie bilden ca. 50 % der hohen anfänglichen Festigkeit auf zwei Wochen und 20 % ihrer Stärke auf drei Wochen aus.
- **PGA schnell:** Ist für schnelle, kurzfristige Schließungen entwickelt. Es ist ideal für die Haut und die Schleimhäute, welche von der schnellen Nahtabsorption profitieren. Es erhält 50 % an Festigkeit bei fünf Tagen, 0 % bei 14 Tagen und ist nach 42 Tagen komplett absorbiert. Es wurde für eine schnelle Absorption mit geringem Zeitaufwand entwickelt.

• Descrizione per:

- **SETA NERA:** Fibra proteica naturale non riassorbibile e con assenza di capillarità. Il plurifilamento di nuova generazione garantisce un'ottima scorrevolezza, annodabilità e resistenza alla trazione.
- **PGA VIOLA:** Sutura sintetica riassorbibile caratterizzata da una notevole morbidezza che garantisce un'ottima scorrevolezza e minor attrito attraverso i tessuti. Ottima capacità di tenuta e sigillo che aiutano a mantenere stabili i lembi durante il processo di guarigione tissutale. La resistenza tensile a due settimane è del 50% mentre a tre del 20%. Il completo riassorbimento si ha tra i 50 e 90 giorni
- **PGA BIANCO RAPID:** Sutura sintetica a riassorbimento rapido. Appositamente studiata e realizzata per la guarigione tissutale in tempi brevi, ideale cioè in tutti quei casi in cui sia necessario garantire un'ottima tenuta dei lembi ed un riassorbimento veloce della sutura stessa. Resistenza tensile del 50% a cinque giorni che decresce fino al 14esimo giorno, il totale riassorbimento avviene a 42 giorni circa

• Omschrijving van:

- **Zijde zwart:** Non-cappilair zijde geeft optimaal gebruiksgemak en makkelijk te knopen. Moderne weeftechniek geeft een egaal glad oppervlak en een grotere treksterkte.
- **PGA violet:** de buitengewoon gladde, en weinig weerstand biedende coating vermindert het meetrekken van weefsel.
- **PGA rapid:** ontwikkeld voor tijdelijke hechtingen, is ideaal voor het hechten van huid en mucosa die van een snelle hechting kunnen profiteren. De eerste 5 dagen behoudt de hechting 50% van zijn kracht, na 14 dagen 0% en uiteindelijk zal na 42 dagen deze volledig geabsorbeerd zijn. Het is gemaakt voor snelle absorptie met een geringe reactie van het weefsel.

CYBERTECH

SURGICAL SUTURE

- Sharp needles for easy penetration
- Strong needle-to-suture attachment ensures consistent quality and less tissue trauma
- Long cutting edge for suturing control

SUTURAS QUIRÚRGICAS

- Especialmente afiladas para una fácil penetración
- El fuerte enganche aguja-sutura asegura una calidad constante y una menor sensación de dolor
- Amplia área de corte para un mejor control

SUTURES CHIRURGICALES

- Aiguilles solides pour faciliter la pénétration
- La solidité de l'aiguille assure une qualité constante et diminue la sensation de douleur
- Longues pointes pour un meilleur contrôle

CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL

- Scharfe Nadeln für eine einfache Penetration
- Die Verbindung von Nadeln und Faden sichert eine gleichbleibende Qualität und verursachen weniger Gewebeverletzungen
- Lang geschnittene Enden für die Kontrolle der Nähte

SUTURE CHIRURGICHE

- Aghi affilati e atraumatici per una facile penetrazione nei tessuti
- Calibro ottimizzato tra ago/filo e senza gradini per garantire robustezza e passaggio nei tessuti
- Aghi con dorso tagliente per un maggior controllo

CHIRURGISCH HECHTMATERIAAL

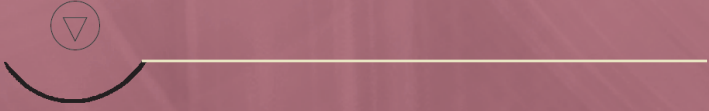
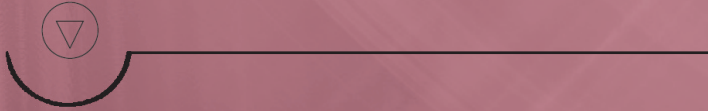
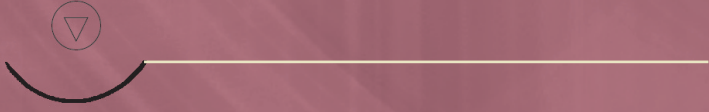
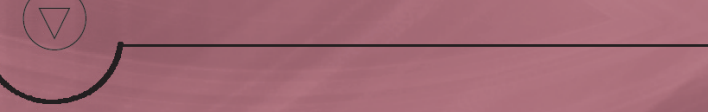

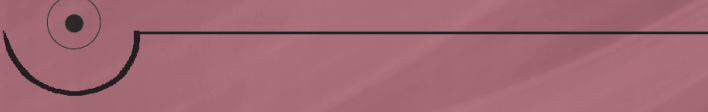
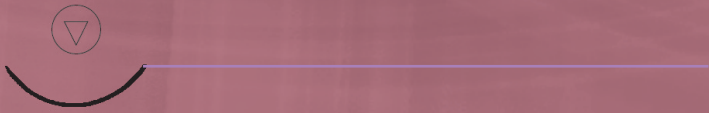
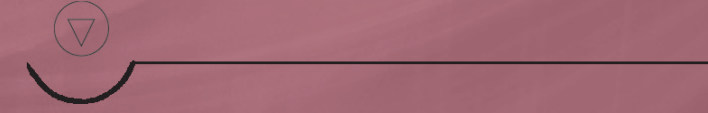
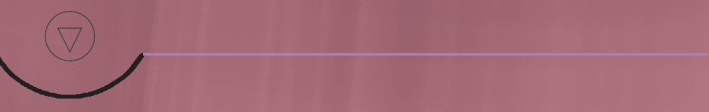
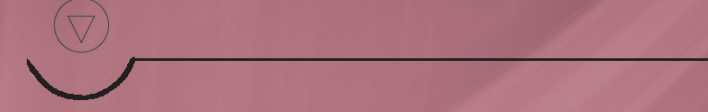
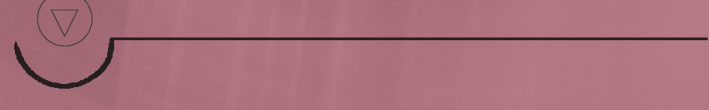
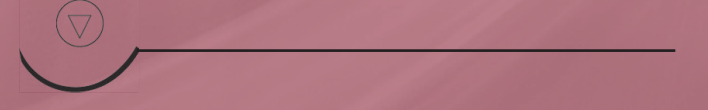
- Scherpe naalden voor eenvoudige penetratie
- Stevige verbinding van naald en draad verzekerd constante kwaliteit en geringere hechtletsel
- Lang gesneden punt voor betere controle tijdens het hechten



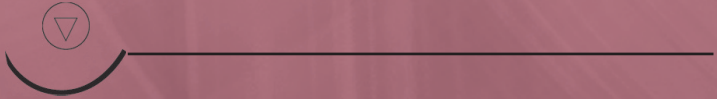
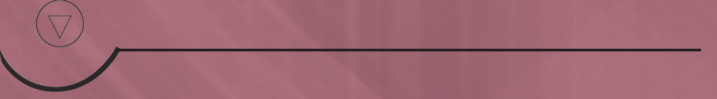
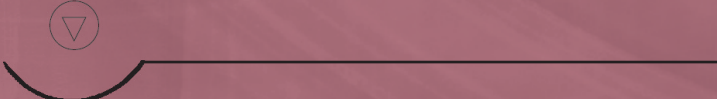
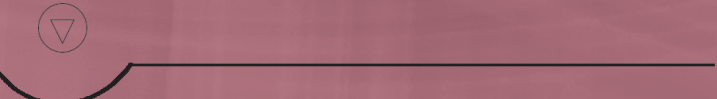

DE Healthcare Ltd
Unit 9, Kingsthorpe Business Centre,
Studland Road, Kingsthorpe,
Northampton NN2 6NE U.K.
www.cybertechbrand.com



SURGICAL SUTURES/SUTURAS QUIRÚRGICAS/SUTURES CHIRURGICALES/CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL /SUTURE CHIRURGICHE/CHIRURGISCH

Item Code	Suture material	Needle Code	Length	Indication	Item Code	Suture material	Needle Code	Length	Indication
900 8112	PGA rapid 3-0	3/8RC18 (C-6)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Absorbable • Braided • Short term wound support • For superficial soft tissues 	900 8118	Silk black 4-0	1/2 RC20 (C-20)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Extremely high surgeons comfort • The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
									
900 8113	PGA rapid 4-0	3/8RC18 (C-6)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Absorbable • Braided • Short term wound support • For superficial soft tissues 	900 8119	Silk black 3-0	1/2 RC23 (C-9)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Extremely high surgeons comfort • The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
									
900 8114	PGA violet 4-0	1/2TP18 (T-28)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Absorbable • Average 50-90 days for absorption 	900 8120	Silk black 3-0	1/2 TP22 (T-14)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Extremely high surgeons comfort • The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
									
900 8115	PGA violet 4-0	3/8RC18 (C-6)	70 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Absorbable • Average 50-90 days for absorption 	900 8121	Silk black 4-0	3/8PRC13 (C-3P)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Extremely high surgeons comfort • The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
									
900 8116	PGA violet 3-0	3/8RC24 (C-7)	70 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Absorbable • Average 50-90 days for absorption 	900 8122	Silk black 5-0	3/8RC13 (C-3)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Extremely high surgeons comfort • The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
									
900 8117	Silk black 3-0	1/2RC15 (HS-16)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Extremely high surgeons comfort • The closure requires a long-term fixation of less than 6 months 	900 8123	Silk black 3-0	3/8RC16 (DS-16)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Extremely high surgeons comfort • The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
									

SURGICAL SUTURES/SUTURAS QUIRÚRGICAS/SUTURES CHIRURGICALES/CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL /SUTURE CHIRURGICHE/CHIRURGISCH

HS Item Code	Suture material	Needle Code	Length	Indication
900 8124	Silk black 4-0	3/8RC16 (DS-16)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> Extremely high surgeons comfort The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
				
900 8125	Silk black 5-0	3/8RC16 (DS-16)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> Extremely high surgeons comfort The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
				
900 8126	Silk black 3-0	3/8RC18 (C-6)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> Extremely high surgeons comfort The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
				
900 8127	Silk black 4-0	3/8RC18 (C-6)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> Extremely high surgeons comfort The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
				
900 8128	Silk black 2-0	3/8RC20 (C-20)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> Extremely high surgeons comfort The closure requires a long-term fixation of less than 6 months
				
900 8129	Silk black 3-0	3/8 RC24 (C-7)	45 cm	<ul style="list-style-type: none"> Absorbable • Braided Short term wound support For superficial soft tissues
	