

CyberPouch Selfseal



L'avantage CyberPouch Selfseal

- Fait avec des encres sans plomb
- Approuvé par la FDA
- Produit à l'usine ultra moderne



Caractéristiques des sachets autocollants CyberPouch Selfseal :

- Papier spécial de grade médical qui rencontre les standards de l'industrie (60gsm).
- Compatible avec les méthodes de stérilisation EO et à la vapeur.
- Facile d'utilisation - enlever la bande adhésive et sceller.
- Flèches indicatrices très visibles qui changent de couleur durant le processus de stérilisation.
- Pli perforé pour faciliter et assurer un raccord hermétique.
- Encres spécialisées qui sont favorables pour l'environnement et ne traversent pas le papier.
- Certifié pour un minimum d'un an, maintient post-stérilisation.
- Les instruments doivent être ensachés en tout temps pour maintenir leur stérilité. Usage unique seulement. Indicateurs externes reflètent seulement que les instruments ont passé le processus de stérilisation.
- Éventail élargi de grandeurs de pochette pour tous types d'instruments.
- Rencontre les normes établies par le Centre de Contrôle des Maladies des Etats-Unis.

Le « CDC » recommande que tous professionnels de la santé dentaires vérifient leur processus de stérilisation à travers une combinaison de techniques mécaniques, chimiques et biologiques pour assurer leur efficacité.


Ils ont identifié plusieurs facteurs courants qui influencent l'efficacité de la stérilisation et les problèmes qui en résultent.

1. Nettoyage insuffisant des instruments.
2. Emballage défectueux ou mal utilisé.
3. Emballage incorrectement choisi pour la méthode de stérilisation.
4. Surcharge de matériel dans l'espace d'emballage.
5. Chargement inexact ou surcharge dans le stérilisateur.
6. Aucune séparation des emballages et des cassettes même sans surchargement.
7. Durée et température inexactes.
8. Utilisation incorrecte du stérilisateur.

(Source : CDC « Centre de Contrôle des Maladies » - Sterilization Monitoring)



CyberPouch Selfseal

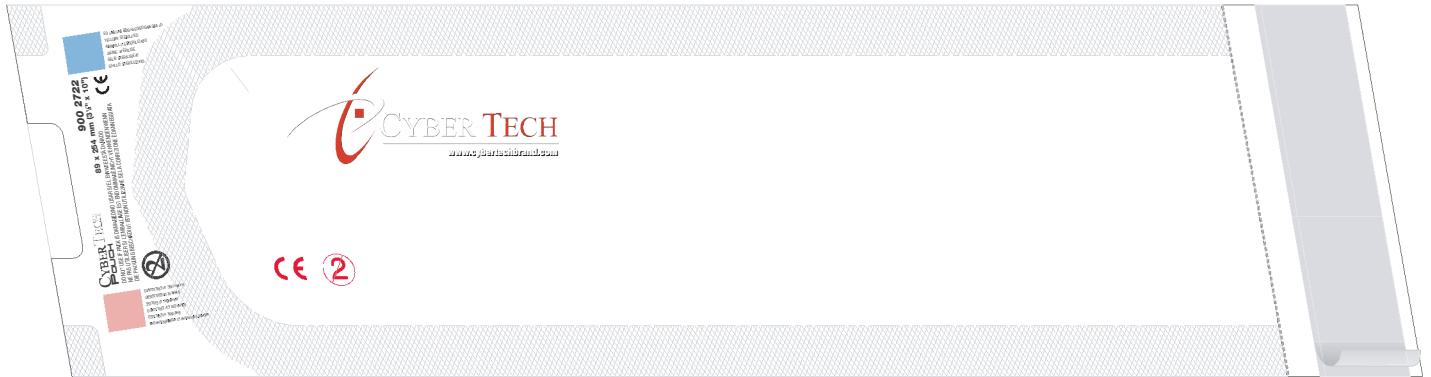

Code	Description du produit	Unités / Boîte
9002722	CyberPouch Selfseal 89 * 254mm	200
9002723	CyberPouch Selfseal 83 * 159mm	200
9002724	CyberPouch Selfseal 134* 280mm	200
9002725	CyberPouch Selfseal 254* 381mm	200

Directives d'utilisation :

1. Insérer les instruments.
2. Enlever l'étiquette adhésive sur le côté de le sachet autocollant CyberPouch Selfseal.
3. Plier sur la perforation pour assurer un raccord hermétique de le sachet autocollant.
4. Positionner loin des murs et du plancher de la chambre du stérilisateur.
5. Monter jusqu'à 275°F (135°C) l'autoclave à « humidité chauffée » OU jusqu'à 50°C (122°F) utilisant la méthode EO.
NOTE: ne commencer pas le décompte tant que le four n'est pas à la température désirée.
Ne pas ouvrir les portes du four. Ne pas ajouter ou enlever des items une fois le processus entamé.
6. Le changement de couleur des indicateurs indique le progrès.
NOTE: certifié aux normes de l'industrie ISO 11140 pour les indicateurs de Classe 1.
7. Enlever la bande adhésive devant le patient. Enregistrer la date et le nom.
8. Peut être joint au dossier du patient pour archivage permanent.

Consultez "votre distributeur" privilégié pour plus d'information



**DE Healthcare Products
Gillingham ME8 OSB U.K.**

Distributed by/Distribuido por/Distribué par/Vertrieb durch/Distribuito da:
And in the USA/Y en EEUU/Et aux Etats-Unis/Und in USA/E in USA:
Denver, PA 17517 USA